

# ToeMotion

## Rekonstruktion des MTP-Gelenkes mit dem **ToeMotion® System**



- ToeMotion®** ist ein **modulares System**, das je nach Diagnose flexibel zur Behandlung des MTP-Gelenkes mit dem **ToeDF Inlay Implantat** eingesetzt **oder zusätzlich** - statt einer Arthrodese - mit dem **Phalangeal Inlay Implantat** eingebracht werden kann.
- Das ToeMotion System kann zudem bei Revisionen eingesetzt werden.
- Das ToeMotion® Inlay System erzeugt eine sichere Primärstabilität und erhält die Gelenkstruktur.
- Langjährige klinische Erfahrung mit über 20.000 MTP Implantationen.
- Ein übersichtliches Instrumentenset: Die Anordnung der Instrumente entspricht den OP-Schritten, dadurch einfache Handhabung.



**Das Arthrosurface ToeMotion® System besteht aus ToeDF Inlay Implantaten - die in verschiedensten Krümmungsradien lieferbar sind - und einem Phalangeal Inlay Implantat. Das ToeMotion System stellt die Mobilität und die natürliche Biomechanik des MTP-Gelenkes wieder her.**

**ToeDF Inlay Implantat**



**Phalangeal Inlay Implantat**

# ToeMotion

## Sichere Fixation

verhindert eine Implantatlockerung



- ✓ Die Fixationsschraube besteht aus einer Titanium-Legierung und sorgt für eine sichere Verankerung im Knochen.
- ✓ Der Innenkonus der Fixationsschraube verbindet Implantat und Schraube, so dass beide Komponenten fest zusammengefügt sind.
- ✓ Die Fixationsschrauben sorgen für eine stabile Verbindung auf beiden Seiten Gelenkes.



## Inlay Implantat Design

erhält die Biomechanik des Gelenkes

- ✓ Phalangeal Komponenten in verschiedenen Größen und Stärken lieferbar.
- ✓ Standardisiertes Gewinde ermöglicht präzise Anpassung der Schraubentiefe.
- ✓ Krümmungsradien des MTP-Implantats verbessern dorsales „Roll-off“.

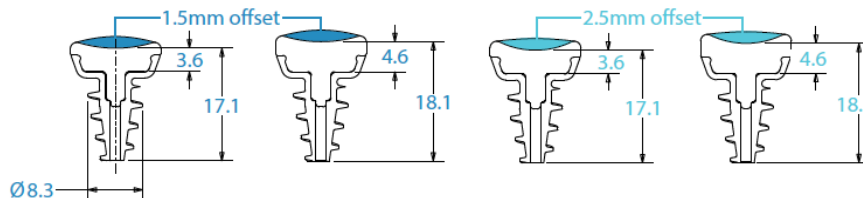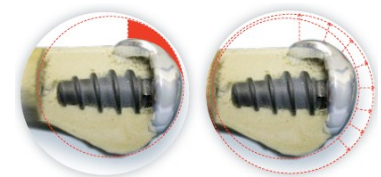

## Bestellinformationen

### Instrumenten System

9000-3002	Instrumenten-Set ToeMotion
6007-1200	2,0 mm Guide Pin für Metatarsal Implantate

### Metatarsal Komponente

9M52-1535	1,5 mm x 3,5 mm Offset
9M52-1545	1,5 mm x 4,5 mm Offset
9M52-2535	2,5 mm x 3,5 mm Offset
9M52-2545	2,5 mm x 4,5 mm Offset
9095-0018	Taper Post, 9,5 mm x 18 mm (nur Metatarsal)

### Proximale Phalangeal-Komponente

9P15-0100	Insert Delivery Tool, phalangeal
9P15-PA01	Modular Insert 1,5 mm Offset- 01(3,6 mm dick)
9P15-PA02	Modular Insert 1,5 mm Offset- 02(4,6 mm dick)
9P15-PB01	Modular Insert 2,5 mm Offset- 01(3,6 mm dick)
9P15-PB02	Modular Insert 2,5 mm Offset- 01(4,6 mm dick)
9P15-S180	Fixationsschraube, DF-P

### Bestellungen bei:

**2med GmbH** . Willhoop 1 . 22453 Hamburg . T:+49(0)40.55 77 96 05 . F:+49(0)40.55 77 98 35 . E:info@2med.biz